

222 / 223

Höhenverstellbarer
Untersuchungstisch

Ritter®
by MIDMARK



Benutzerhandbuch

CE

003-1355-01 (Ausgabe B)

Benutzer-Produktidentifikation

(Diese Informationen bitte für Wartung/Kundendienst aufbewahren.)

Modellnummer:

Seriennummer:

Kaufdatum:


**Name des Besitzers /
Einrichtung:**

Name des Händlers:

Tel.-Nr. des Händlers:


Midmark-Vertragshändler:

222

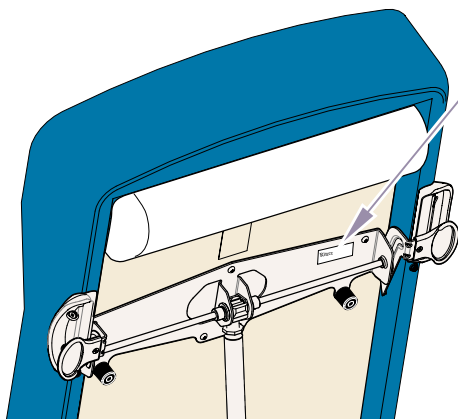

**Anordnung der
Serien-/
Modellnummer**

223

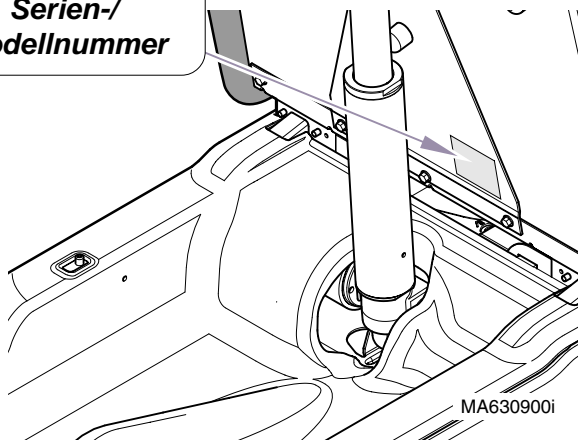

Inhaltsverzeichnis

Wichtige Informationen

Sicherheitssymbole	2
Zweckbestimmung	3
Positionierung des Patienten	3
Elektromagnetische Störung	3
Autorisierter CE-Repräsentant	3
Richtlinien für Transport und Aufbewahrung	3
Sicherheitshinweise	4

Bedienung

Höheneinstellung der Tischfläch	5
Positionierung der Rückenlehne:	
<i>Modell 222</i>	6
<i>Modell 223</i>	7
Exam Assistant™ Schubladensystem	8
Papierrolle und Abreißschienen	9
Fersenstützen	10
Fußstütze und Instrumentenfach	11
Schubladenheizung (<i>optional</i>)	11
Beckenhochlagerung	12
Doppelsteckdose	13

Wartung

Reinigung	14
Vorbeugende Wartung	14
Kundendienst	14

Zubehör

Liste des zugelassenen Zubehörs	15
---------------------------------------	----

Technische Daten

Gewicht, Abmessungen, elektrische Bestimmungen	16
Behördliche Genehmigungen:	
<i>Modell 222</i>	17
<i>Modell 223</i>	18
Bewegungsradius und Abmessungen	19

Garantieinformationen

Eingeschränkte Garantie	20
-------------------------------	----

Wichtige Informationen

Sicherheitssymbole



Vorsicht

Weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zu Verletzungen führen kann.



Gerätewarnung

Weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zu Sachschäden führen kann.

Hinweis

Hebt Vorgänge, Verfahren oder Bedingungen her vor.



Siehe Benutzerhandbuch
in Bezug auf wichtige Informationen.



Zeigt die korrekte Oberseite beim
Versand an




Zerbrechlich



Typ B, angeschlossenes Gerät



Schutzerdung

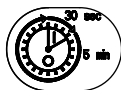

Arbeitszyklus (Motorlaufzeit):
30 Sekunden eingeschaltet, 5 Minuten ausgeschaltet



Medizinisches Gerät
(UL2601-1, 94XM)
Midmark Corporation



Trocken halten

3



Maximale Stapelhöhe
(Paletten)



Nennleistung der Sicherungen



Gefährliche Stromspannung /
Elektroschockgefahr

IPX1

Tropfwassergeschützt

***Dieses Produkt wurde nur in Bezug auf Elektroschock
Brand- sowie mechanische Gefahren gemäß
UL2601-1 und CAN/CSA C22.2 Nr. 601.1 geprüft.***

Zweckbestimmung

Dieses Produkt ist entweder als Stuhl oder als Tisch für die Positionierung von Patienten bei allgemeinen Untersuchungen und Behandlungen durch medizinisches Fachpersonal vorgesehen.

Positionierung des Patienten

Der Tisch ist für die folgenden Positionen bei der Untersuchung konstruiert:

- Bauchlage
- Rückenlage
- Lateral-Sims
- Lithotomie

Elektrische Bestimmungen



Vorsicht

Die meisten freiliegenden Metallteile des Tisches sind geerdet. Wenn eine Kauterisierung oder ein ähnliches Verfahren durchgeführt wird, muss der Patient durch nicht leitendes Material von den Metallteilen des Tisches isoliert werden. Andernfalls können Elektroschock bzw. Verbrennungen des Patienten die Folge sein.

Elektromagnetische Störung

Dieser Midmark-Untersuchungstisch wurde so konstruiert, dass elektromagnetische Störungen mit anderen Geräten weitgehend ausgeschlossen sind. Sollten zwischen diesem und einem anderen Gerät jedoch trotzdem elektromagnetische Störungen auftreten, so sollte das die Störung verursachende Gerät aus dem Raum entfernt und/oder das Gerät an einen isolierten Stromkreis angeschlossen werden.

Autorisierter CE-Repräsentant

Wenn Ihr Land Mitglied der EU ist, richten Sie bitte alle Fragen, Vorkommnisse oder Beschwerden an den folgenden, von Midmark autorisierten CE-Repräsentanten:

Promotal
22, Rue De St. Denis
53500 Ernee,
FRANKREICH
Tel.-Nr.: 33-2-430-517-76
Fax: 33-2-430-569-10

Richtlinien für Transport und Aufbewahrung

Umgebungstemperaturbereich: +5 °C bis +38 °C

Relative Luftfeuchtigkeit 10 % bis 90 % (nicht kondensierend)

Luftdruck 500 hPa bis 1060 hPa (0,49 atm bis 1,05 atm)

Sicherheitshinweise





Vorsicht

Beim Absenken des Tisches können Gegenstände unter der Fußstütze oder dem Kopfpolster dazu führen, dass der Tisch kippt. Beim Absenken des Tisches muss der Umgebungsbereich freigeäumt sein.

In der niedrigsten Position (45,7 cm) beträgt der Abstand zwischen der Unterseite der Schublade und dem Boden nur ca. 9 cm. Vor dem Absenken des Tisches sicherstellen, dass der Patient (*besonders Füße*) sowie Gegenstände diesen Bereich nicht behindern.

Bei Fehlfunktionen des Tisches das Fußpedal sofort loslassen, das Netzkabel abziehen und dem Patienten vom Tisch helfen. Wenn die Fehlfunktion nicht behoben werden kann, den Kundendienst verständigen.

Bei Nichtbeachtung dieser Anweisungen besteht Verletzungsgefahr und/oder können Geräte beschädigt werden.

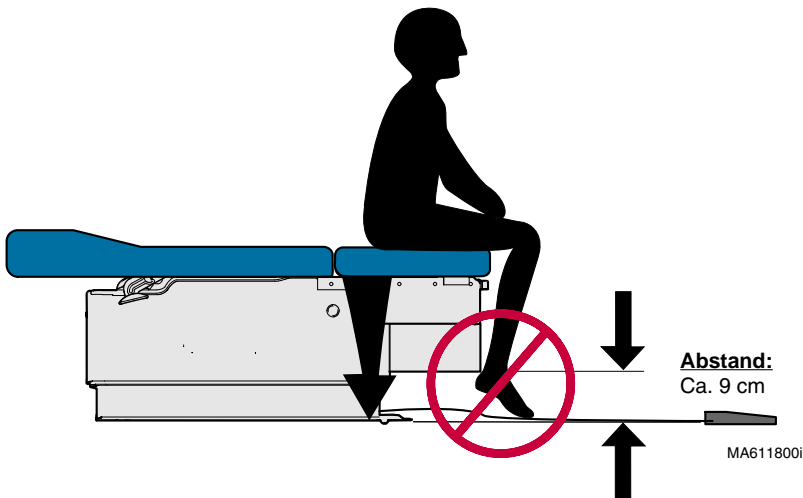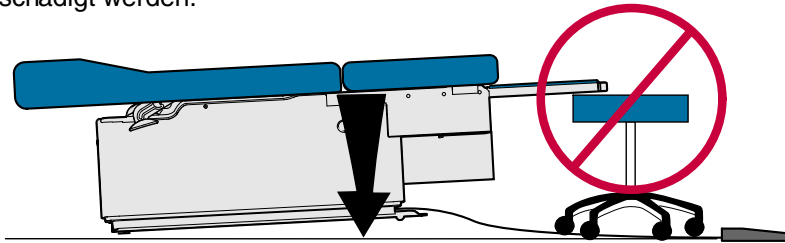

Bedienung

Höheneinstellung der Tischfläche


Hinweis

Der Tisch stoppt automatisch, wenn die maximale bzw. minimale Höhe erreicht ist.

Zur Höhenverstellung des Tisches...

auf die entsprechende Taste drücken und diese gedrückt halten, bis die gewünschte Position erreicht ist.


222

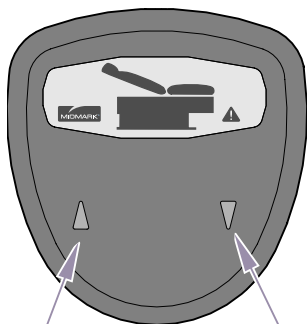

Nach oben

Nach unten


223

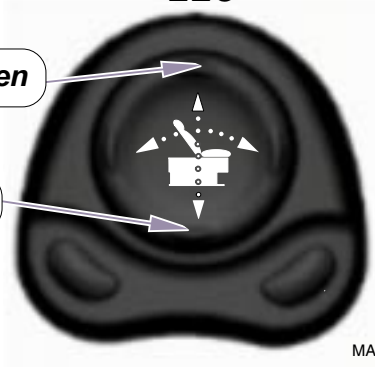

Nach oben

Nach unten

MA658601i

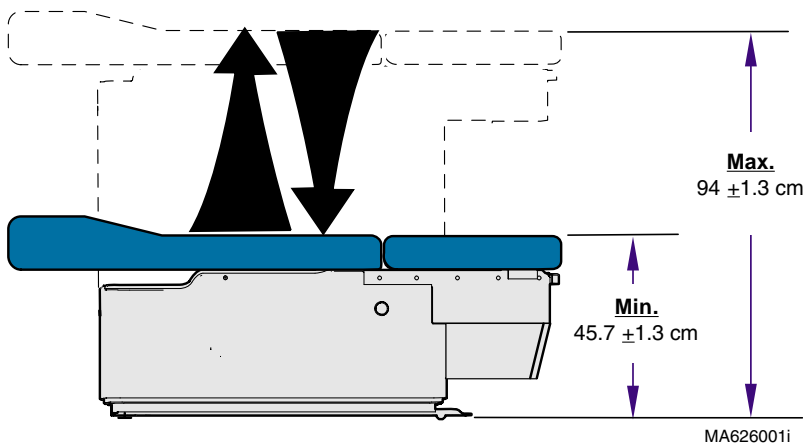

Max.
94 ± 1.3 cm


Min.
45.7 ± 1.3 cm

MA626001i

Positionierung der Rückenlehne - Modell 622

Zur Positionierung der Rückenlehne...

- A.** Freigabegriff der Rückenlehne auf einer Seite zusammendrücken.
- B.** Rückenlehne zurücklehnen.
- C.** Griff loslassen, wenn sich die Rückenlehne in der gewünschten Position befindet.

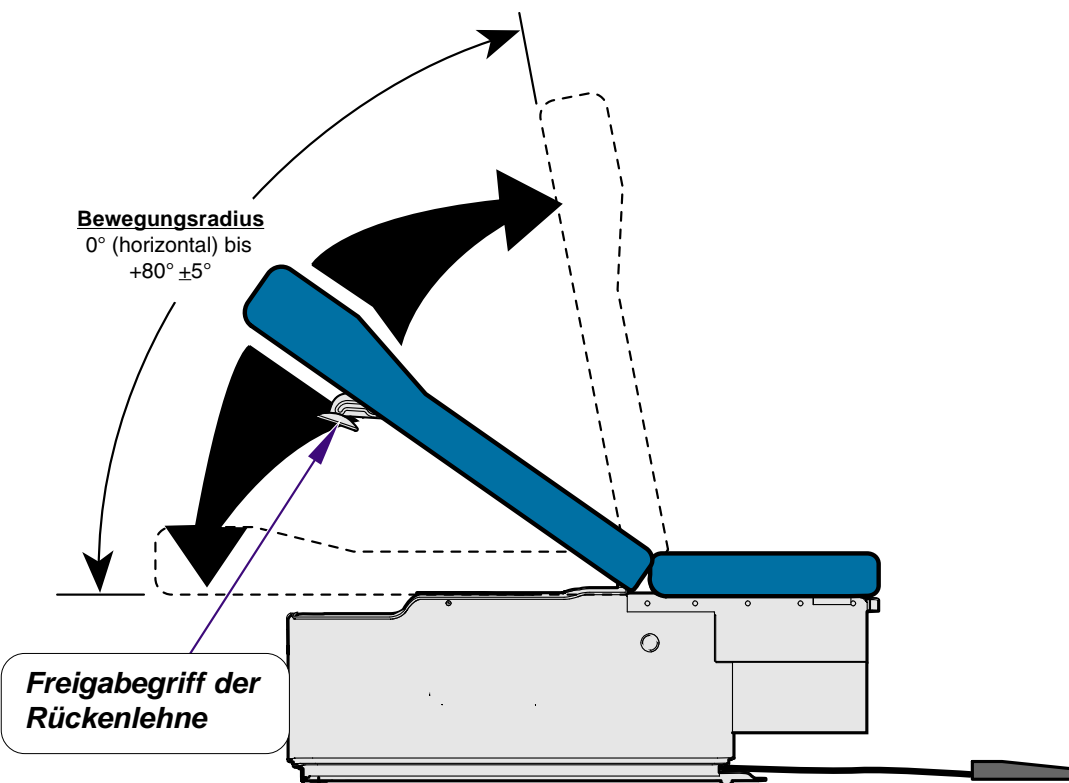

MA600300i

Positionierung der Rückenlehne - Modell 223


Hinweis

Die Rückenlehne hält bei Erreichen der maximalen und minimalen Höhe automatisch an.

Zur Positionierung der Rückenlehne...
auf die entsprechende Taste drücken und diese gedrückt halten, bis die gewünschte Position erreicht ist.

Nach unten


Nach oben

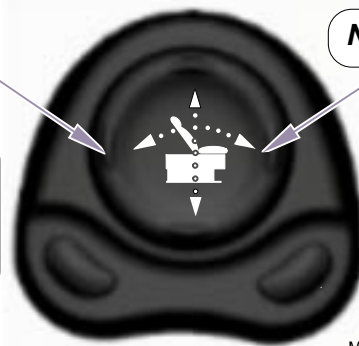

MA658601i

Bewegungsradius

0° (horizontal) bis
 $+80^\circ \pm 5^\circ$

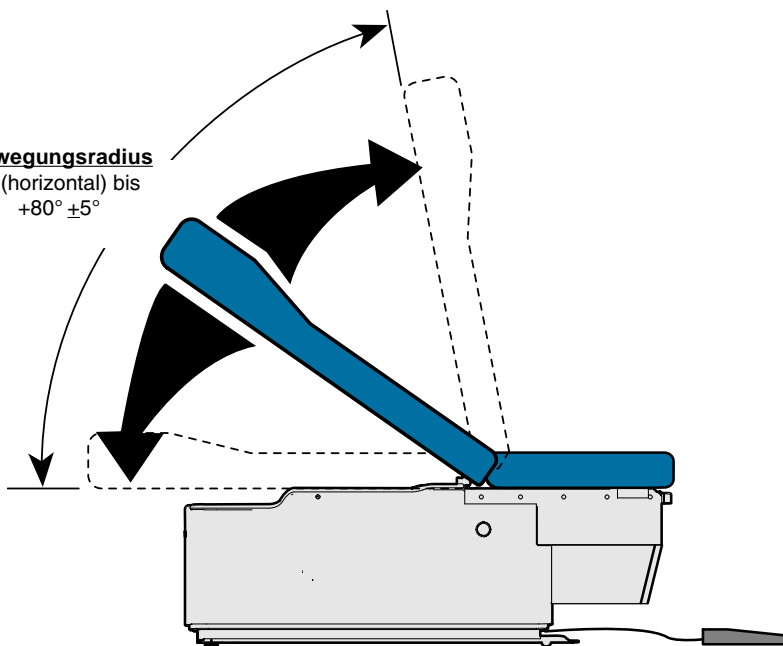


MA626201i

Exam Assistant™

Schubladensystem

Zur Verwendung der Schubladenvorderseite als Ablagefläche...

Schubladenvorderseite herausziehen, um den magnetischen Riegel freizugeben.

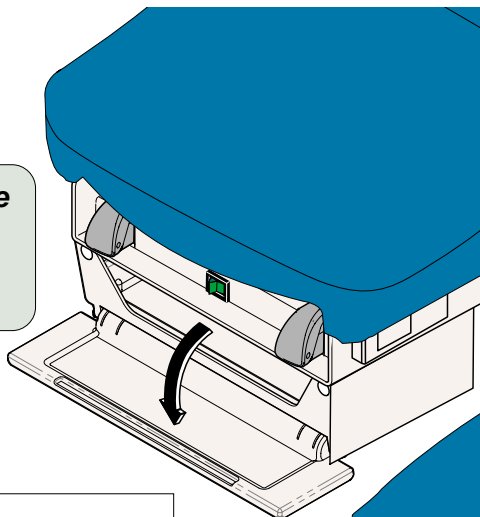


Gerätewarnung

Das maximal zulässige Traggewicht der Ablagefläche beträgt 4,5 kg.

Laschen

Wenn die Schubladenvorderseite über die Horizontale hinaus weiter nach unten geklappt wird...

auf die beiden Laschen drücken und die Schubladenvorderseite nach oben schwingen.

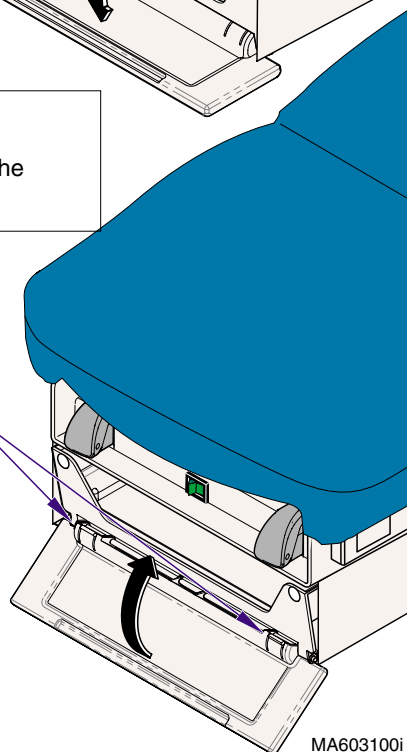

MA603100i

Papierrolle und Abreißschienen


Hinweis

Es können bis zu vier Papierrollen unter der Rückenlehne aufbewahrt werden.


Max. Abmessungen der Papierrolle 53,3 cm Länge x 8,9 cm Durchmesser

Zur Installation der Papierrolle...


Enden der Haltestange in die beiden Halterungen unter dem Kopfende des Polsters einführen.

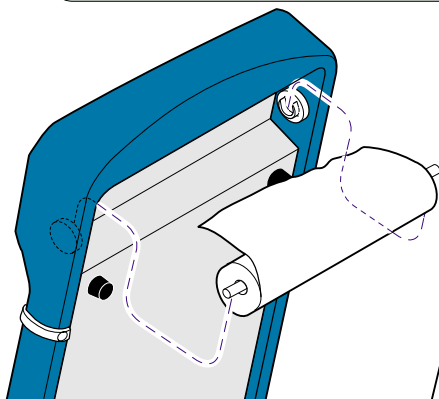

Vernähte Polsterung

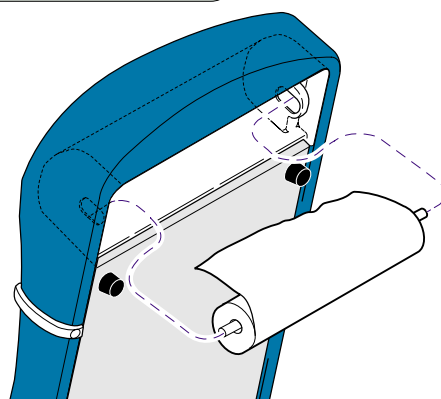

Nahtlose Polsterung

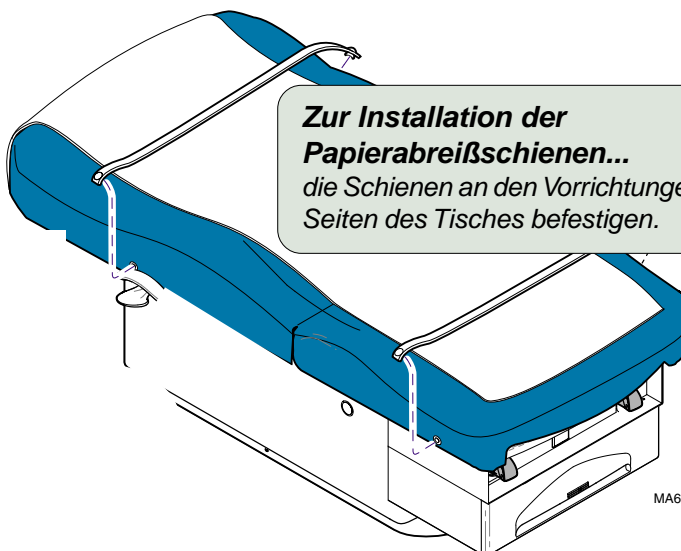

Zur Installation der

Papierabreißschienen...

die Schienen an den Vorrichtungen auf beiden Seiten des Tisches befestigen.

MA631300i

Fersenstützen




Vorsicht

Vor dem Einsatz sicherstellen, dass die Fersenstützen verriegelt sind.
Die Fersenstützen tragen nicht das gesamte Gewicht des Patienten.

Zur Positionierung der Fersenstützen...

- A.** die Stützen vorziehen und auseinander falten.
- B.** Fersenstütze leicht anheben und nach Bedarf nach links oder rechts schieben.
- C.** Fersenstütze in der gewünschten Position loslassen.

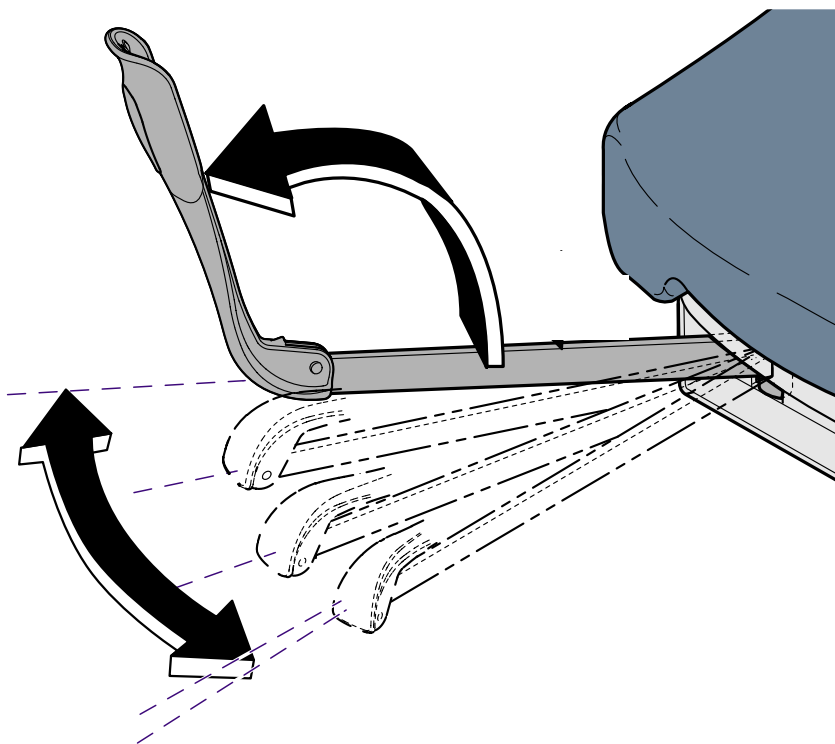


MA602500i

Fußstütze und Instrumentenfach



Vorsicht

Die Fußstütze soll nicht das gesamte Gewicht des Patienten tragen.

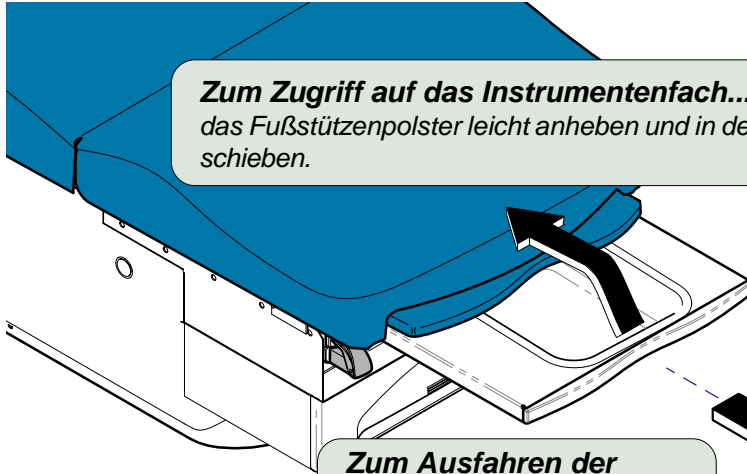


Zum Zugriff auf das Instrumentenfach...

das Fußstützenpolster leicht anheben und in den Tisch schieben.

Zum Ausfahren der Fußstütze...

Fußstütze in die gewünschte Position ziehen.

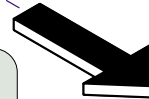

MA626400i

Schubladenheizung (optional)


Hinweis

Der Schubladenheizungsschalter leuchtet, wenn die Heizung eingeschaltet ist (I).

Die Schubladenheizung erwärmt den Schubladeninhalt auf ca. 37°C.

Zur Aktivierung/Deaktivierung der Schubladenheizung...

Heizungsschalter in die gewünschte Position bringen.

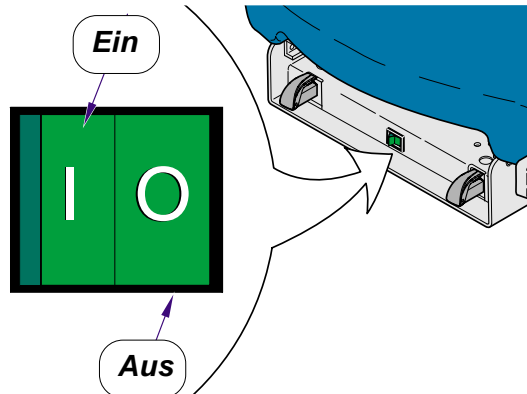


MA603200i

Beckenhochlagerung (optional)


Zum Anheben der Sitzfläche...

Sitzfläche anheben, bis die Stützstange nach oben schnell.

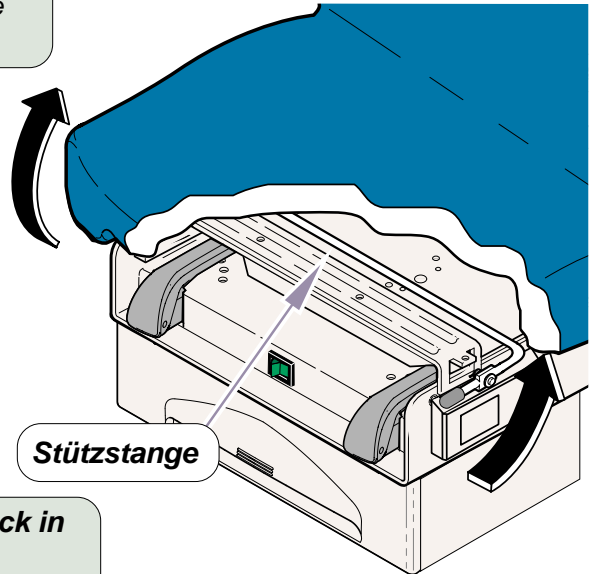

Zum Absenken der Sitzfläche zurück in die Horizontalstellung...

- A.** Sitzfläche leicht anheben.
- B.** Stützstange zum Kopfende des Tisches schieben.
- C.** Sitzfläche loslassen.

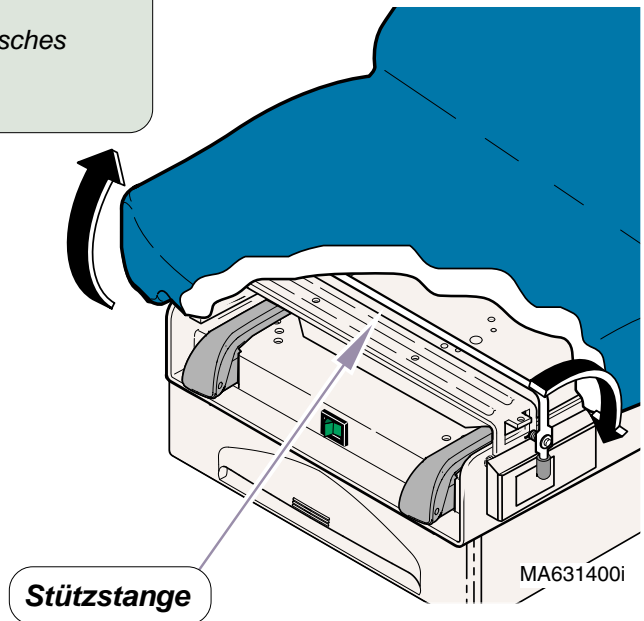


Doppelsteckdose (optional - nicht verfügbar bei Modellen für 230 VAC)

Die Doppelsteckdose liefert Strom für Zubehör, das während medizinischer Verfahren verwendet wird. Wenn die maximal zulässige Last der Steckdose überschritten wird, unterbricht der Trennschalter [unter dem Sitz] die Stromversorgung zur Steckdose.

Maximale Last [beide Steckdosen zusammen]: 115 VAC, 5 A

Zum Zurücksetzen des Trennschalters...

Trennschalter durch Drücken zurücksetzen.

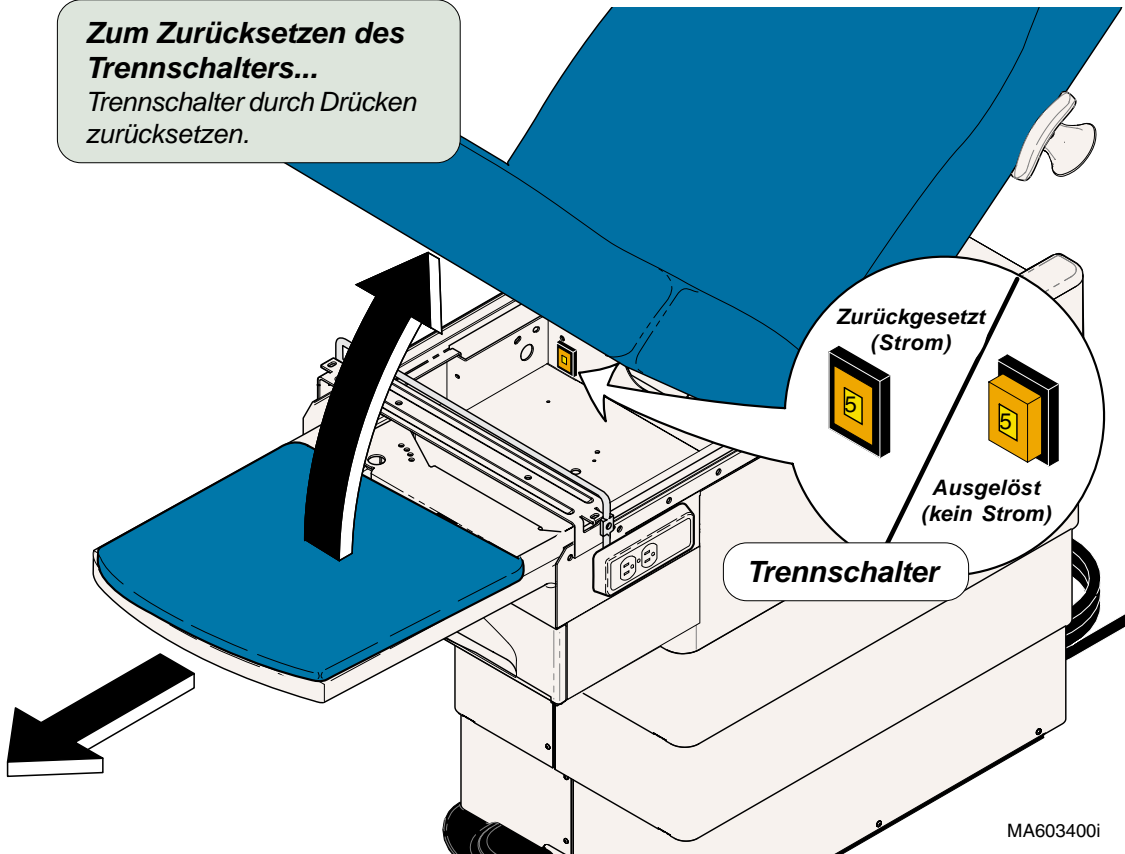

Wichtige Informationen

Reinigung

Poster mit einer Lösung aus 5 % Bleichmittel/Wasser reinigen.



Gerätewarnung

Die Polsterung des Tisches ist beständig gegen die meisten in einer medizinischen Umgebung auftretenden Flecken, kann aber durch Lösungs- und Färbemittel beschädigt werden. Verschüttete Flüssigkeiten sind umgehend vom Polster zu entfernen.

Tisch wöchentlich reinigen. Lackierte Metallflächen und Kunststoffflächen mit einem sauberen, weichen Tuch und milden Reinigungsmitteln reinigen. Regelmäßiges Auftragen von Möbelpolitur erleichtert die Reinigung und verhindert das Abstumpfen der Lackflächen.

Vorbeugende Wartung

Die folgenden Bereiche sind regelmäßig zu prüfen:

- Das Netzkabel sollte weder Risse noch andere sichtbare Schäden aufweisen.
- Alle Befestigungselemente sollten angebracht und fest angezogen sein.
- Alle mechanischen Funktionen sollten ordnungsgemäß durchgeführt werden können.

Die folgenden Bereiche sind zur Gewährleistung eines geräuscharmen und gleichmäßigen Betriebs regelmäßig zu schmieren:

- Rückenscharnier (*mit einem dünnflüssigen Maschinenöl*)
- Schiene der Fußstütze (*mit Möbelpolitur*)

Den Untersuchungstisch alle sechs Monate von einem Vertragshändler untersuchen lassen.

Kundendienst

Hinweis

Halten Sie die Modell- und Seriennummer bereit, wenn Sie sich mit dem Kundendienst in Verbindung setzen.

Setzen Sie sich mit Ihrem Midmak-Vertragshändler in Verbindung oder besuchen Sie uns unter www.midmark.com, wenn Sie Informationen zu dem für Sie zuständigen Kundendienstzentrum benötigen. Zur direkten Kontaktaufnahme mit Midmark:

1-800-Midmark (1-800-643-6275) oder +1 937-526-3662
8.00 Uhr bis 17.00 Uhr Montag bis Freitag (Ostküstenzeit der USA)
[außer an US-Feiertagen]

Zubehör

Liste des zugelassenen Zubehörs

Die folgende Liste enthält die für diesen Tisch zugelassenen Zubehörteile:

Zubehörname	Bestellnummer	Einschränkungen / Zweckbestimmung
Proto Rest	9A04001	Zweckbestimmung: Zur Unterstützung und Lagerung des Patienten während einer proktologischen Untersuchung.
Edelstahl	9A70000	Zweckbestimmung: Zur Aufnahme von verschütteten Flüssigkeiten Instrumentenfach während urologischer Verfahren.
Urologiewanne	9A104001	Zweckbestimmung: Zur Aufnahme von verschütteten Flüssigkeiten mit Schlauch während urologischer Verfahren.
Beinhalter	9A319002	Zweckbestimmung: Zum Abstützen der Knie und Beine des Patienten.
Nur Klemme/Haken (Beinhalter)	9A319003	Zweckbestimmung: Zur Befestigung der Beinhalter am Tisch.
Beinhalter (mit Gelenk)	9A320001	Zweckbestimmung: Zum Abstützen der Knie und Beine des Patienten.
Hinteres Aufbewahrungsfach	9A313001	Zweckbestimmung: Für zusätzliche Aufbewahrungsmöglichkeiten am Untersuchungstisch.
Verstellbare Armstütze	9A314001	Zweckbestimmung: Zur Stütze des Patienten beim Aufsteigen/Absteigen auf den bzw. vom Tisch
Befestigung für Welch-Allyn-Lampe	9A315002	Zweckbestimmung: Zur Befestigung einer Welch-Allyn-Lampe am Untersuchungstisch.

Technische Daten

Gewicht, Abmessungen, elektrische Bestimmungen

Patientengewicht (max.) 181,4 kg

Papierrolle (max. Größe): 53,3 cm Länge x 8,9 cm Durchmesser

Bewegungsradius und
Abmessungen (Siehe *Bewegungsradius und
Abmessungen*)

Tischgewicht:

[nur Modelle für 230 VAC: 230-V-Transformator liefert zus. 6,5 kg]

Modell 222 / 223 147,4 kg

mit Verpackung und Versandplatte 192,7 kg

Netzkabel: 243,8 cm lang

Elektrische Bestimmungen: [Siehe Tabelle mit behördlichen
Genehmigungen]

Fußpedalspannung: 14 VAC, SELV (Safety Extra Low Voltage/
Schutzkleinspannung)

Doppelsteckdose (optional)

max. Last: 115 VAC, 5A

Sicherungen:

Modelle für 115/230 VAC:

F1 & F2 (auf Hauptplatine) 10 A, 250 V, träge, 1/4 Zoll x 1 1/4 Zoll

F3 (auf Hauptplatine) 5 A, 250 V, träge, 1/4 Zoll x 1 1/4 Zoll

F4 (auf Hauptplatine) 187 mA, 250 V, träge, 1/4 Zoll x 1 1/4 Zoll

Modelle mit Schubladenheizung (optional)

Verteilertafelsicherungen (2) 800 mA, 250 V, träge, 5 x 20 mm

Nur Modelle für 230 VAC:

neben dem IEC-Anschluss (2) 4 A, 250 V, träge, 5 x 20 mm

Arbeitszyklus (Motorlaufzeit): Aussetzbetrieb
[30 Sekunden einblet /
5 Minuten ausgeschalt]

Klassifizierungen: Klasse 1, Typ B angeschlossenes Gerät,
Normalaussetzbetrieb

Schutz gegen eindringende Flüssigkeiten: IPX1

Behördliche Genehmigungen: [Siehe Tabelle mit behördlichen
Genehmigungen]

**Dieses Gerät darf nicht in der Nähe von leicht entzündlichen Anästhesie-Gemischen, die Luft,
Sauerstoff oder Stickstoffoxid enthalten, verwendet werden.**




Tabelle mit behördlichen Genehmigungen - Modell 222

Modell	Beschreibung	Serien- nummer beginnt mit	Konform mit:							Elektrische Nennwerte:		
			UL 2601	CAN/CSA 22.2, #601.1-M90	UL 544	CAN/CSA 22.2, #125	EN 60601-1-2 (EMC)	EN 60601-1	CE	VAC +/- 10%	A	Hertz
222-001	Ritter-Tisch (Grundausrüstung) (Standard-Polster)	RG	X	X			X	X	X	115	5.5	50/60
222-002	Ritter-Tisch (Grundausrüstung) mit Steckdose (Standard-Polster)	RH			X	X	X		X	115	10.5	50/60
222-003	Ritter-Tisch (Grundausrüstung) mit Schubladenheizung/ Beckenhochlagerung (Standard- Polster)	RJ	X	X			X	X	X	115	6	50/60
222-004	Ritter-Tisch (Grundausrüstung) mit Steckdose/ Beckenhochlagerung/ Schubladenheizung (Standard- Polster)	RK			X	X	X		X	115	11	50/60
222-005	Ritter-Tisch (Grundausrüstung) (nahtloses Polster)	RG	X	X			X	X	X	115	5.5	50/60
222-006	Ritter-Tisch (Grundausrüstung) mit Steckdose (nahtloses Polster)	RH			X	X	X		X	115	10.5	50/60
222-007	Ritter-Tisch (Grundausrüstung) mit Schubladenheizung/ Beckenhochlagerung (nahtloses Polster)	RJ	X	X			X	X	X	115	6	50/60
222-008	Ritter-Tisch (Grundausrüstung) mit Steckdose/ Beckenhochlagerung/ Schubladenheizung (nahtloses Polster)	RK			X	X	X		X	115	11	50/60
222-009	Ritter-Tisch (Grundausrüstung, Export) mit Beckenhochlagerung (nahtloses Polster)	RL					X	X	X	230	2.75	50/60
222-010	Ritter-Tisch (Grundausrüstung, Export) mit Steckdose (nahtloses Polster)	RM					X	X	X	230	3	50/60

Tabelle mit behördlichen Genehmigungen - Modell 223

Modell	Beschreibung	Serien-nummer beginnt mit	Konform mit:							Elektrische Nennwerte:		
			UL 2601	CAN/CSA 22.2, #601.1-M90	UL 544	CAN/CSA 22.2, #125	EN 60601-1-2 (EMC)	EN 60601-1	CE	VAC +/- 10%	A	Hertz
223-001	Ritter-Tisch (automatisch verstellbare Rückenlehne) (Standard-Polster)	SC	X	X			X	X	X	115	5.5	50/60
223-002	Ritter-Tisch (automatisch verstellbare Rückenlehne) mit Steckdose (Standard-Polster)	SD			X	X	X		X	115	10.5	50/60
223-003	Ritter-Tisch (automatisch verstellbare Rückenlehne) mit Schubladenheizung/ Beckenhochlagerung (Standard-Polster)	SE	X	X			X	X	X	115	6	50/60
223-004	Ritter-Tisch (automatisch verstellbare Rückenlehne) mit Steckdose/Beckenhochlagerung/ Schubladenheizung (Standard-Polster)	SF			X	X	X		X	115	11	50/60
223-005	Ritter-Tisch (automatisch verstellbare Rückenlehne) (nahtloses Polster)	SC	X	X			X	X	X	115	5.5	50/60
223-006	Ritter-Tisch (automatisch verstellbare Rückenlehne) mit Steckdose (nahtloses Polster)	SD			X	X	X		X	115	10.5	50/60
223-007	Ritter-Tisch (automatisch verstellbare Rückenlehne) mit Schubladenheizung/ Beckenhochlagerung (nahtloses Polster)	SE	X	X			X	X	X	115	6	50/60
223-008	Ritter-Tisch (automatisch verstellbare Rückenlehne) mit Steckdose/Beckenhochlagerung/ Schubladenheizung (nahtloses Polster)	SF			X	X	X		X	115	11	50/60
223-009	Ritter-Tisch (automatisch verstellbare Rückenlehne, Export) mit Beckenhochlagerung (nahtloses Polster)	SG					X	X	X	230	2.75	50/60
223-010	Ritter-Tisch (automatisch verstellbare Rückenlehne, Export) mit Steckdose (nahtloses Polster)	SH					X	X	X	230	3	50/60

Bewegungsradius und Abmessungen

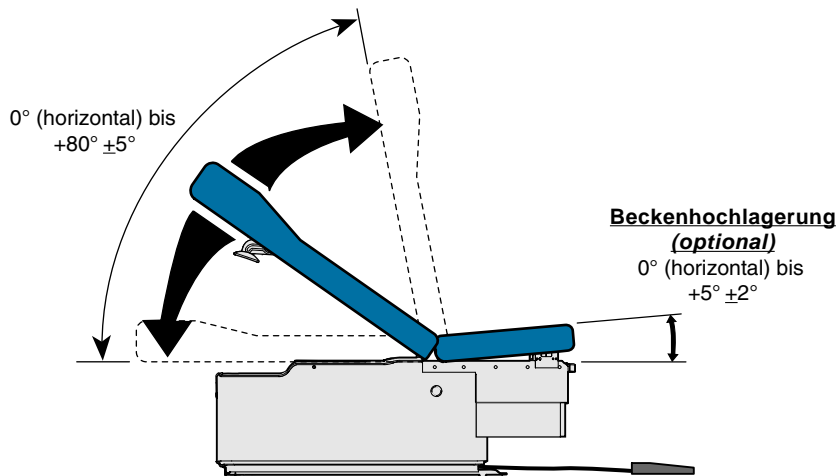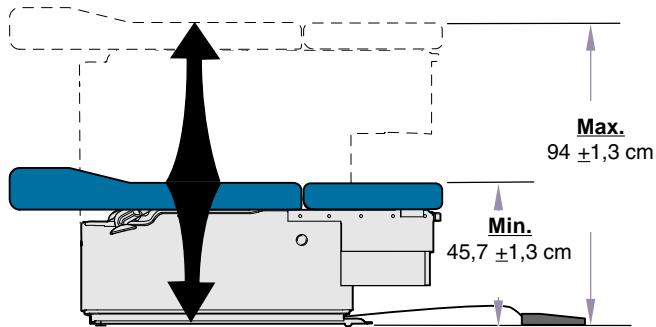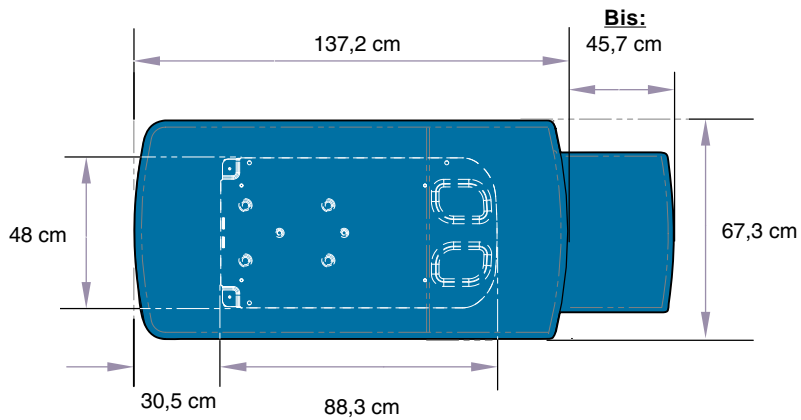

MA599801i

Garantieinformationen

Eingeschränkte Garantie

GARANTIEUMFANG

Die Midmark Corporation („Midmark“) garantiert dem Originalkäufer, dass die von der Firma Midmark produzierten Produkte und Komponenten der neuen Produktreihe „Alternate Care“ (mit Ausnahme der Komponenten, die gemäß des Absatzes „Ausnahmen“ nicht Teil der Garantie sind) bei normaler Verwendung und Wartung keine Schäden in Material und Verarbeitung aufweisen. Die Verpflichtungen der Firma Midmark im Rahmen dieser Garantieerklärung beschränken sich nach eigenem Ermessen der Firma Midmark entweder auf die Reparatur bzw. den Ersatz der Teile, von deren Fehler die Firma Midmark innerhalb des Garantiezeitraums informiert wurde und die nach Inspektion durch die Firma Midmark als defekt befunden wurden.

GARANTIEZEITRAUM

Der Garantiezeitraum beginnt mit dem Tag der Lieferung an den Erstbenutzer und beträgt für sämtliche Produkte und Komponenten ein (1) Jahr.

AUSNAHMEN

Von dieser Garantieerklärung sind die folgenden Punkte ausgeschlossen, für die die Firma Midmark keine Haftung übernimmt: (1) Reparaturen und Ersatz aufgrund von falscher Verwendung, Missbrauch, Fahrlässigkeit, Veränderung, Unfall, Versandschaden bzw. Verfälschung; (2) Produkte, die nicht gemäß der „Montageanleitung“ und/ oder „Montage- und Bedienungsanleitung“ der Firma Midmark für das jeweilige Produkt installiert, verwendet bzw. gereinigt wurden. (3) Konsumgüter; (4) Zubehörteile bzw. Teile, die nicht von der Firma Midmark hergestellt wurden; (5) jegliche Kosten für Neuerstellungen, Reparaturen, Ersatzteile, Montagen oder andere Arbeiten, die an oder in Verbindung mit derartigen Produkten ausgeführt wurden, die nicht ausdrücklich im Voraus in schriftlicher Form von der Firma Midmark genehmigt wurden.

ALLEINIGES RECHTSMITTEL

Im Rahmen dieser Garantieerklärung ist die Firma Midmark lediglich zur Reparatur und zum Ersatz defekter Teile verpflichtet. Die Firma Midmark ist nicht haftbar für jegliche direkten, besonderen, indirekten, zufälligen, typischen und Folgeschäden, einschließlich, aber nicht ausschließlich des Schadenersatzes für verlorene Gewinne oder Nutzungsausfall.

KEINE BEVOLLMÄCHTIGUNG

Keine Person und kein Unternehmen sind bevollmächtigt, andere mit den Produkten im Zusammenhang stehende Haftungsansprüche oder Verpflichtungen an die Firma Midmark zu stellen.

DIESE GARANTIEERKLÄRUNG IST DIE EINZIGE GARANTIEERKLÄRUNG DER FIRMA MIDMARK UND GILT ANSTELLE ALLER ANDEREN AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN GARANTIEERKLÄRUNGEN. DIE FIRMA MIDMARK GIBT KEINE GESETZLICHEN GEWÄHRLEISTUNGEN IRGEND EINER ART, EINSCHLIESSLICH JEDLICHER GARANTIEERKLÄRUNGEN ÜBER MARKTFÄHIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. DIE GARANTIEERKLÄRUNG BESCHRÄNKT SICH AUF DIE REPARATUR UND DEN ERSATZ DEFEKTER TEILE.

SF-1487 AUSGABE A1